



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Gebruiksaanwijzing Platformweegschaal

## KERN ECB

Versie 1.3

05/2007

NL



ECB-BA-nl-0713



# KERN ECB

Versie 1.3 05/2007

## Gebruiksaanwijzing Platformweegschaal

### Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Conformiteitverklaring</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Fundamentele aanwijzingen (algemeen)</b>	<b>6</b>
3.1	Reglementair gebruik	6
3.2	Ongeoorloofd gebruik	6
3.3	Waarborg	6
3.4	Toezicht op de testmiddelen	7
<b>4</b>	<b>Essentiële veiligheidsinstructies</b>	<b>7</b>
4.1	Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht nemen	7
4.2	Scholing van het personeel	7
<b>5</b>	<b>Transport en opslag</b>	<b>7</b>
5.1	Controle bij overname	7
5.2	Verpakking	7
<b>6</b>	<b>Uitpakken, installatie en inbedrijfstelling</b>	<b>8</b>
6.1	Opstelplaats, inzetgebied	8
6.2	Uitpakken	9
6.2.1	Installeren	9
6.2.2	Omvang van de levering	9
6.3	Netaansluiting c.q. batterijvoeding	9
6.3.1	Netaansluiting	9
6.3.2	Werking met batterijvoeding/accuvoeding (optioneel)	9
6.4	Eerste inbedrijfstelling	11
6.5	Justering	11
6.6	Justeren	11
<b>7</b>	<b>Operatie</b>	<b>12</b>
7.1	Wegen	12
7.2	Tarreren	12
7.3	Achtergrondverlichting van het display	13
7.4	Dosering en Zero-tracking	14
7.5	Functie AUTO-OFF	15

7.6	Functie Reset	16
<b>8</b>	<b>Onderhoud, instandhouding, afvalverwerking</b>	<b>17</b>
8.1	Reinigen	17
8.2	Onderhoud, instandhouding	17
8.3	Afvalverwerking	17
<b>9</b>	<b>Kleine hulp bij pannes</b>	<b>18</b>

## 1 Technische gegevens

<b>KERN</b>	<b>ECB10K10</b>	<b>ECB20K20</b>	<b>ECB50K50</b>
<i>Afreesbaarheid</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Weegbereik</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Tarreebereik (subtractief)</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Reproduceerbaarheid</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Lineariteit</i>	± 20 g	± 40 g	± 100 g
<i>Justering/toegestane afwijking conform M3</i>	5 kg	10 kg	20 kg
<i>Overgangstijd (typisch)</i>	2 - 3 sec.		
<i>Bedrijfstemperatuur</i>	+ 0° C .... + 40° C		
<i>Luchtvochtigheid</i>	max. 80 % (niet condenserend).		
<i>Behuizing (b x d x h) mm</i>	320 x 300 x 60		
<i>Weegplaat (B x T) mm</i>	320 x 260		
<i>Gewicht kg (netto)</i>	1,7		

## 2 Conformiteitverklaring



**KERN & Sohn GmbH**

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: [info@kern-sohn.de](mailto:info@kern-sohn.de)

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.de](http://www.kern-sohn.de)

## Conformiteitverklaring

**Declaration of conformity for apparatus with CE mark**

**Conformiteitverklaring voor apparaten met CE-merkten**

**Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE**

**Declaración de conformidad para aparatos con distintivo CE**

**Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE**

- English** We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
- Nederlands** Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
- Français** Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
- Español** Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
- Italiano** Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

### Electronic Parcel Scale: **KERN ECB**

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336EEC EMC	EN 61000-3-2 :1995+A1&A2 : 1998 EN 61000-3-3 :1995 EN 50081-1 (EN 55022) : 1992 EN 50082-1 (EN 61000-4-2) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-3) : 1997 EN 50082-1 (ENV 50204) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-4) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-6) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-5) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-11) : 1997

Date: 12.12.2002

Signature: 

Gottl. KERN & Sohn GmbH  
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

### **3 Fundamentele aanwijzingen (algemeen)**

#### **3.1 Reglementair gebruik**

De door u aangekochte weegschaal dient om de weegwaarde van te wegen goed te bepalen. Z is voor het gebruik als "niet-automatische weegschaal" voorzien. Dit betekent dat het te wegen goed met de hand voorzichtig en in het midden van de weegplaat aangebracht wordt. Nadat er een stabiele weegwaarde bereikt werd, kan de weegwaarde afgelezen worden.

#### **3.2 Ongeoorloofd gebruik**

Weegschaal niet voor dynamische wegingen gebruiken. Indien er kleine hoeveelheden van het te wegen goed verwijderd of toegevoerd worden, kunnen er door de in de weegschaal aanwezige "stabiliteitscompensatie" foutieve weegresultaten aangegeven worden! (Voorbeeld: Langzaam uitstromen van vloeistoffen uit een op de weegschaal gesitueerd reservoir.)

Geen permanente belasting op de weegplaat achterlaten. Deze kan het meetsysteem beschadigen.

Schokken en overbelastingen van de weegschaal boven de aangegeven maximale belasting („Max.“), te verminderen met een eventueel reeds aanwezige tarralast, onvoorwaardelijk vermijden. Weegschaal zou hierdoor beschadigd kunnen worden.

Weegschaal nooit in explosieve ruimten bedienen. De standaarduitvoering niet explosievast.

De weegschaal mag vanuit constructief oogpunt niet gewijzigd worden. Dit kan tot foutieve weegresultaten, veiligheidstechnische tekortkomingen en ook tot de vernieling van de weegschaal leiden.

De weegschaal mag uitsluitend in overeenstemming met de beschreven, vooraf bepaalde gegevens gebruikt worden. Afwijkende gebruiksmogelijkheden/toepassingsgebieden dienen door de firma KERN schriftelijk goedgekeurd te worden.

#### **3.3 Waarborg**

Garantie komt te vervallen bij

- Veronachtzaming van onze in de gebruiksaanwijzing vooraf bepaalde gegevens
- Gebruik buiten de beschreven toepassingen
- Wijzigen of openen van het apparaat
- Mechanische beschadiging en beschadiging door media, vloeistoffen
- Natuurlijke slijtage en afslijting
- Ondeskundig uitgevoerde installatie of elektrische installatie
- Overbelasting van het meetsysteem

### **3.4 Toezicht op de testmiddelen**

In het kader van de kwaliteitsborging moeten de meettechnische eigenschappen van de weegschaal en van een eventueel aanwezig testgewicht met regelmatige tussentijden gecontroleerd worden. De verantwoordelijke gebruiker dient hiervoor een geschikt interval en dient tevens de aard en de omvang van deze test te definiëren. Informatie met betrekking tot het toezicht op de testmiddelen van weegschalen evenals de hiervoor noodzakelijke testgewichten zijn op de Homepage van de firma KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)) beschikbaar. In haar geaccrediteerde DKD-kalibreerlaboratorium kunnen er bij de firma KERN snel en voordelig testgewichten en weegschalen gekalibreerd worden (herleiding tot de nationale norm).

## **4 Essentiële veiligheidsinstructies**

### **4.1 Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht nemen**

Neem deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en inbedrijfstelling zorgvuldig door, ook indien u met weegschalen van de firma KERN reeds ervaring opgedaan hebt.

### **4.2 Scholing van het personeel**

Het apparaat mag uitsluitend door geschoolde medewerkers bediend en onderhouden worden.

## **5 Transport en opslag**

### **5.1 Controle bij overname**

Gelieve de verpakking onmiddellijk bij ontvangst en ook het apparaat bij het uitpakken op eventueel zichtbare, uitwendige beschadigingen te controleren.

### **5.2 Verpakking**

Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor een eventueel noodzakelijk transport naar de fabrikant.

Voor het transport naar de fabrikant mag enkel de originele verpakking gebruikt worden. Torn vóór de verzending alle aangesloten kabels en losse/beweegbare onderdelen los.

Beveilig alle onderdelen, bijvoorbeeld voedingseenheid etc., tegen het wegglijden en tegen beschadiging.

## 6 Uitpakken, installatie en inbedrijfstelling

### 6.1 Opstelplaats, inzetgebied

De weegschalen zijn zodanig geconstrueerd, dat er in de gebruikelijke gebruiksomstandigheden betrouwbare weegresultaten behaald worden. Exact en snel werkt u indien u de juiste plaats van installatie voor uw weegschaal kiest.

#### ***Naam daarom op de plaats van installatie het volgende in acht:***

- Weegschaal op een stabiel, recht oppervlak zetten;
- Extreme warmte alsook temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door installatie naast de verwarmingsinstallatie of vlakke zoninstraling, vermijden;
- Weegschaal tegen directe tocht door geopende vensters en deuren beschermen;
- Trillingen tijdens het wegen vermijden;
- Weegschaal tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen;
- Stel het apparaat niet gedurende een langere periode aan aanzienlijke vochtigheid bloot. Een ongeoorloofde bedauwing (condensatie van luchtvochtigheid aan het apparaat) kan zich voordoen indien er een koud toestel in een beduidend warmere omgeving gebracht wordt. Acclimatiseer in dit geval het van het stroomnet verbroken apparaat ca. 2 uur lang bij kamertemperatuur.
- Statische oplading van te wegen goed, weegreservoir en windscherm vermijden.

Bij het opduiken van elektromagnetische velden, bij statische opladingen en ook bij een onstabiele stroomvoorziening zijn er grote displayafwijkingen (foutieve weegresultaten) mogelijk. De plaats van opstelling moet dan gewisseld worden.

## 6.2 Uitpakken

De weegschaal voorzichtig uit de verpakking nemen, plastic hoes verwijderen en de weegschaal op de voorziene werkplaats installeren.

### 6.2.1 Installeren

De weegschaal dient zodanig geïnstalleerd te worden, dat de weegplaat exact waterpas staat.

### 6.2.2 Omvang van de levering

#### **Standaard accessoires:**

<b>KERN ECB</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Weegschaal met roestvrij stalen plaat</i></li><li>• <i>Voedingsapparaat</i></li><li>• <i>Gebruiksaanwijzing</i></li></ul>

## 6.3 Netaansluiting c.q. batterijvoeding

### 6.3.1 Netaansluiting

De stroomvoorziening gebeurt door middel van het externe voedingsapparaat. De opgedrukte spanningswaarde moet met de lokale spanning overeenstemmen. Maak enkel gebruik van originele voedingsapparaten van de firma KERN. Het gebruik van andere fabrikaten vereist de toestemming van de firma Kern. Uitgangsspanning netadapter: 9V DC (polariteit: binnen minus)

### 6.3.2 Werking met batterijvoeding/accuvoeding (optioneel)

Batterijdeksel aan onderzijde van de weegschaal openen. Batterijen van 6 x 1,5 volt (formaat AA) inleggen.

Batterijdeksel weer sluiten. Om zuinig met de batterij om te gaan, schakelt de weegschaal 3 minuten na beëindigde weging automatisch uit.


Voor de werking met batterijvoeding beschikt de weegschaal over een automatische uitschakelfunctie, die in het menu (hoofdstuk 7.5) geactiveerd of gedeactiveerd kan worden. Als de batterijen verbruikt zijn, verschijnt er op het display „LO“. Toets „ON/OFF“ indrukken en onmiddellijk batterijen wisselen.

Indien de weegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, batterijen uitnemen en afzonderlijk bewaren. Het uitlopen van batterijvloeistof zou de weegschaal kunnen beschadigen.


**De optionele accu wordt door middel van het bijgeleverde voedingsapparaat geladen.**

De gebruiksduur van de accu bedraagt ca. 100 uren. De laadduur, totdat de accu volledig herladen is, ca. 10 uren.


## Inbouw van de accu:

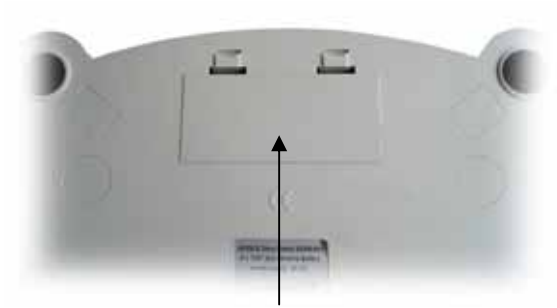

1. Afdekking van de batterijhouder verwijderen

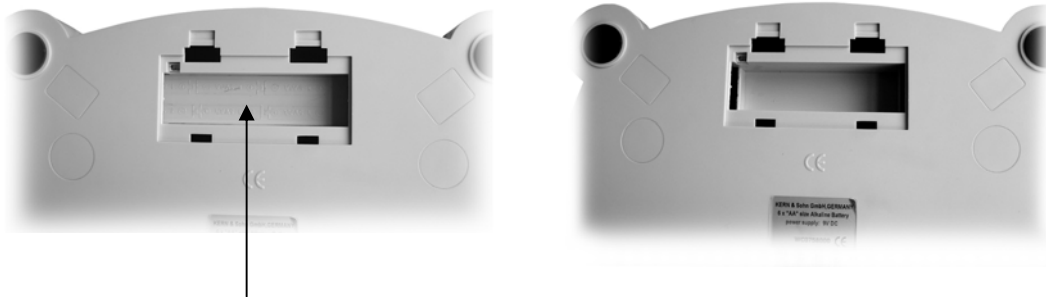

2. Tussenschot verwijderen door dit te verschuiven en uit te lichten

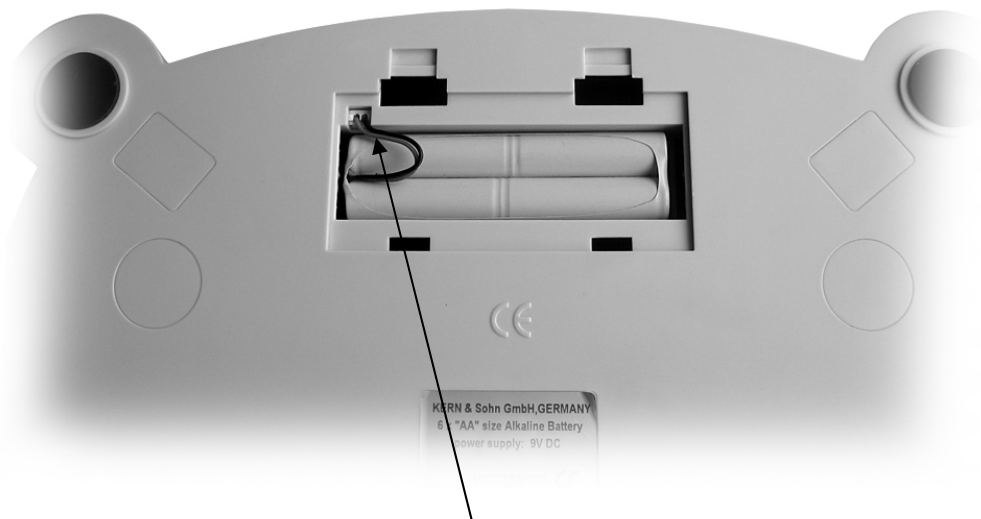

3. Accu inleggen en aansluiten

## 6.4 Eerste inbedrijfstelling

Een opwarmtijd van 5 minuten na het inschakelen stabiliseert de meetwaarden. De nauwkeurigheid van de weegschaal is afhankelijk van de lokale valversnelling. Beslist de in hoofdstuk "Justering" vermelde aanwijzingen in acht nemen.

## 6.5 Justering

Omdat de waarde van de g-versnelling niet op iedere plaats op aarde gelijk is, moet iedere weegschaal – in overeenstemming met het ten grondslag dienende fysieke weegprincipe – op de plaats van opstelling op de aldaar heersende g-versnelling afgestemd worden (enkel indien de weegschaal niet reeds in de fabriek op de plaats van opstelling gejusteerd werd). Dit justeerprocédé moet bij de eerste inbedrijfstelling, telkens na een wissel van de locatie en ook bij schommelingen van de omgevingstemperatuur doorgevoerd worden. Om tot nauwkeurige meetwaarden te komen, is het bovendien aanbevelenswaardig, ook in de weegmodus periodiek te justeren.

## 6.6 Justeren

Met een justeer gewicht is de nauwkeurigheid van de weegschaal te allen tijde controleerbaar en opnieuw instelbaar.

### Werkwijze bij de justering:

Stabiele omgevingsomstandigheden in acht nemen. Een korte opwarmtijd van ca. 5 minuten voor de stabilisatie is noodzakelijk.

Bediening	Weergave
Weegschaal met toets <b>ON/OFF</b> inschakelen	<input type="text" value="0,00"/>
Toets <b>TARE</b> 3 seconden lang ingedrukt houden Op het display verschijnt de voor de weegschaal vereiste gewichtswaarde voor de justering	<input type="text" value="10,00"/>
Zet het vereiste justeer gewicht op de weegplaat (zie hoofdstuk 1 „Technische gegevens“) Even later verschijnt:	<input type="text" value="F"/>
Bij een justeerfout of een verkeerd justeer gewicht verschijnt: In dit geval stroomvoorziening onderbreken en justering herhalen	<input type="text" value="E"/>
Neem het gewicht van de weegplaat, daarna volgt automatisch de sprong terug naar de normale weegmodus. De justering is met succes beëindigd.	<input type="text" value="0,00"/>

## 7 Operatie

### 7.1 Wegen

- De weegschaal wordt door het indrukken van de toets **ON/OFF** ingeschakeld.
- De weegschaal voert een inschakeldiagnose door (2 seconden) en gaat dan naar „**0.00**“.
- Indien het te wegen goed zwaarder dan het weegbereik is, verschijnt op het display „**E**“ (=overbelasting).
- De weegschaal wordt door een keer indrukken van de toets **ON/OFF** ingeschakeld.

### 7.2 Tarreren

- Weegschaal met toets „**ON/OFF**“ inschakelen en aanduiding „**0,00**“ afwachten. Tarralast opleggen en toets **TARE** indrukken.
- Het display van de weegschaal gaat naar „**0.00**“.
- Te wegen goed kan nu in het tarravat ingevoerd en de weegwaarde kan afgelezen worden.

### 7.3 Achtergrondverlichting van het display

In het menu kunt u de werking van de achtergrondverlichting van het display respectievelijk in- en uitschakelen. Ga hiervoor als volgt tewerk:

- ⇒ Bij een uitgeschakelde weegschaal de toets **TARE** indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **TARE** niet loslaten. Toets **ON/OFF** eveneens indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **ON/OFF** ingedrukt houden, maar de toets **TARE** loslaten
- ⇒ Toets **TARE** opnieuw indrukken
- ⇒ Beide toetsen ingedrukt houden totdat op het display "**bl**" verschijnt
- ⇒ Beide toetsen loslaten. De weegschaal bevindt zich in het menu.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** "**bl**" selecteren
- ⇒ Met de **TARE** -toets bevestigen. Op het display verschijnt de actuele instelling „**ON**“, „**CH**“ of „**OFF**“.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** kan er nu een keuze uit de drie volgende instellingen gemaakt worden:

Weergave	Instelling	Functie
„ <b>bl</b> “ <b>ON</b>	Achtergrondverlichting ingeschakeld	Contrastrijk display, dat ook in het donker afgelezen kan worden.
„ <b>bl</b> “ <b>OFF</b>	Achtergrondverlichting uitgeschakeld	Zuinige batterijmodus
„ <b>bl</b> “ <b>CH</b>	Achtergrondverlichting wordt 10 seconden na het bereiken van een stabiele weegwaarde automatisch uitgeschakeld	Zuinige batterijmodus

- ⇒ Bevestig uw keuze met de toets **TARE**. Na een korte tijspanne keert de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus.

#### 7.4 Dosering en Zero-tracking

Met de functie Auto-Zero worden kleine snelheidsschommelingen automatisch getarreed.

Indien er kleine hoeveelheden van het te wegen goed verwijderd of toegevoerd worden, kunnen er door de in de weegschaal aanwezige "stabiliteitscompensatie" foutieve weegresultaten aangegeven worden! (Voorbeeld: Langzaam uitstromen van vloeistoffen uit een op de weegschaal gesitueerd reservoir)

Bij doseringen met kleine gewichtsschommelingen is het daarom aanbevelenswaardig, deze functie uit te schakelen.

Bij een uitgeschakelde **Zero-Tracking** wordt het display van de weegschaal echter onrustiger.

##### Zero-Tracking activeren/deactiveren:

- ⇒ Bij een uitgeschakelde weegschaal de toets **TARE** indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **TARE** niet loslaten. Toets **ON/OFF** eveneens indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **ON/OFF** ingedrukt houden, maar de toets **TARE** loslaten
- ⇒ Toets **TARE** opnieuw indrukken
- ⇒ Beide toetsen ingedrukt houden totdat op het display "**bl**" verschijnt
- ⇒ Beide toetsen loslaten. De weegschaal bevindt zich in het menu.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** "**tr**" selecteren
- ⇒ Met de **TARE** -toets bevestigen. Op het display verschijnt de actuele instelling.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** kan er nu tussen volgende instellingen een keuze gemaakt worden:

Weergave	Instelling
„tr“ <b>ON</b>	Auto-Zero ingeschakeld
„tr“ <b>OFF</b>	Auto-Zero uitgeschakeld

- ⇒ Bevestig uw keuze met de toets **TARE**. Na een korte tijspanne keert de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus.

## 7.5 Functie AUTO-OFF

Voor de werking met batterijvoeding beschikt de weegschaal over een automatische uitschakelfunctie, die in het menu geactiveerd of gedeactiveerd kan worden. Ga als volgt te werk:

- ⇒ Bij een uitgeschakelde weegschaal de toets **TARE** indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **TARE** niet loslaten. Toets **ON/OFF** eveneens indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **ON/OFF** ingedrukt houden, maar de toets **TARE** loslaten
- ⇒ Toets **TARE** opnieuw indrukken
- ⇒ Beide toetsen ingedrukt houden totdat op het display "**bl**" verschijnt
- ⇒ Beide toetsen loslaten. De weegschaal bevindt zich in het menu.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** "**AF**" selecteren
- ⇒ Met de **TARE** -toets bevestigen. Op het display verschijnt de actuele instelling.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** kan er nu tussen volgende instellingen een keuze gemaakt worden:

Weergave	Instelling
„AF“ <b>ON</b>	Om zuinig met de batterij om te gaan, schakelt de weegschaal 3 minuten na een beëindigde weging automatisch uit
„AF“ <b>OFF</b>	Ononderbroken werking

- ⇒ Bevestig uw keuze met de toets **TARE**. Na een korte tijspanne keert de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus.

## 7.6 Functie Reset

Terugstelling van het menu naar fabrieksinstellingen.

- ⇒ Bij een uitgeschakelde weegschaal de toets **TARE** indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **TARE** niet loslaten. Toets **ON/OFF** eveneens indrukken en ingedrukt houden
- ⇒ Toets **ON/OFF** ingedrukt houden, maar de toets **TARE** loslaten
- ⇒ Toets **TARE** opnieuw indrukken
- ⇒ Beide toetsen ingedrukt houden totdat op het display "**bl**" verschijnt
- ⇒ Beide toetsen loslaten. De weegschaal bevindt zich in het menu.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** "**rSt**" selecteren
- ⇒ Met de **TARE** -toets bevestigen. Op het display verschijnt de actuele instelling.
- ⇒ Met de toets **ON/OFF** kan er nu tussen volgende instellingen een keuze gemaakt worden:

Weergave	Instelling
„rst“ <b>YES</b>	Terugstelling van het menu naar fabrieksinstellingen.
„rst“ <b>NO</b>	Geen terugstelling van het menu naar fabrieksinstellingen.

- ⇒ Bevestig uw keuze met de toets **TARE**. Na een korte tijspanne keert de weegschaal automatisch terug naar de weegmodus.

## **8 Onderhoud, instandhouding, afvalverwerking**

### **8.1 Reinigen**

Gelieve het apparaat vóór de reiniging van de bedrijfsspanning te verbreken.

Maak geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen (oplosmiddelen of dergelijke), maar enkel een met mild zeepsop bevochtigd doekje. Gelieve erop te letten dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt en wrijf het met een droog, zacht doekje na.

Losse monsterresten/poeder kunnen voorzichtig met een penseel of handstofzuiger verwijderd worden.

**Gemorst te wegen goed onmiddellijk verwijderen.**

### **8.2 Onderhoud, instandhouding**

Het apparaat mag uitsluitend door geschoolde en door de firma gemachtigde servicetechnici geopend worden.

Vooraleer te openen, van het stroomnet verbreken.

### **8.3 Afvalverwerking**

De afvalverwerking van verpakking en apparaat dient door de exploitant in overeenstemming met het geldende nationale of regionale recht van de locatie van de gebruiker doorgevoerd te worden.

## 9 Kleine hulp bij pannes

In geval van een storing in het verloop van het programma dient de weegschaal even uitgeschakeld en van het stroomnet verbroken te worden. Met het weegprocédé moet men dan terug vanaf het begin van start gaan.

Hulp:

### **Storing**

### **Mogelijke oorzaak**

- |   |  |
|---|--|
| <p><i>De gewichtsaanduiding is niet verlicht.</i></p>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>De weegschaal is niet ingeschakeld.</i></li><li>• <i>De verbinding met het stroomnet is onderbroken (netsnoer niet ingestoken/defect).</i></li><li>• <i>De netspanning is uitgevallen.</i></li></ul>  |
| <p><i>De gewichtsaanduiding verandert voortdurend</i></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tocht/luchtbewegingen</i></li><li>• <i>Trillingen van de tafel/vloer</i></li><li>• <i>Die weegplaat heeft contact met vreemde voorwerpen.</i></li><li>• <i>Elektromagnetische velden/statische oplading (andere plaats van opstelling kiezen/zo mogelijk, storend apparaat uitschakelen)</i></li></ul>                              |
| <p><i>Het weegresultaat is blijkbaar foutief</i></p>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Het display van de weegschaal staat niet op nul</i></li><li>• <i>De justering is niet meer correct.</i></li><li>• <i>Er heersen aanzienlijke temperatuurschommelingen.</i></li><li>• <i>Elektromagnetische velden/statische oplading (andere plaats van opstelling kiezen/zo mogelijk, storend apparaat uitschakelen)</i></li></ul> |

Als er zich andere foutmeldingen voordoen, weegschaal uit- en nogmaals inschakelen. Indien de foutmelding blijft bestaan, fabrikant op de hoogte brengen.