



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montage-instructies Statief

KERN BVBP-A01

Versie 1.0

02/2008

NL



BVBP-A01-IA-nl-0810



KERN BVBP-A01

Versie 1.0 02/2008

Installatie-instructies Statief


In de hoogte verstelbaar statief, maximale hoogte 1550 mm

Omvang van de levering - montage statief:

| | | |
|--|---|---|
| | <p>1. Individuele onderdelen in overeenstemming met afbeelding monteren</p> | <p>2. Houder voor het displaygedeelte vastschroeven</p> |
| | | |

Montage statief - afleesinstrument:

1. Tafelpoot van het afleesinstrument losschroeven

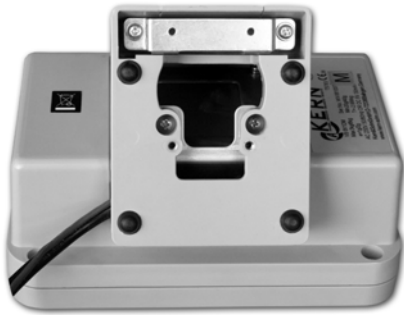

2. Afdekplaat losschroeven en door de afdekplaat van het statief vervangen



3. Afdekplaat vastschroeven



4. Statiefhouder in overeenstemming met afbeelding op de afdekplaat schroeven



5. Afleesinstrument met de borgschroef (1) aan het statief bevestigen.



6. Draaiknoppen (2, 3) voor de positionering van het display indraaien