



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Stativ

KERN BVBP-A01


Version 1.0

02/2008

D



BVBP-A01-IA-d-0810

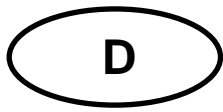

KERN BVBP-A01

Version 1.0 02/2008

Installationsanleitung Stativ

Höhenverstellbares Stativ, Maximalhöhe 1550 mm

Lieferumfang - Montage Stativ:

	<p>1. Einzelteile lt. Abb. zusammenbauen</p>	<p>2. Halterung für das Anzeigeteil anschrauben</p>

Montage Stativ - Anzeigegerät:

1. Tischfuß des Anzeigegerätes abschrauben



2. Abdeckplatte abschrauben und gegen die Abdeckplatte des Stativs tauschen



3. Abdeckplatte anschrauben



4. Stativhalterung laut Abb. auf die Abdeckplatte schrauben



5. Anzeigegerät mit der Sicherungsschraube (1) am Stativ befestigen.



6. Drehknöpfe (2, 3) zur Positionierung des Displays eindrehen