

Brochure produit

08.08.2026

KERN SET-14

EasyTouch Individual Print - Impressions personnalisables

FRANÇAIS

Software EasyTouch


SET-14

**Individual
Print**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

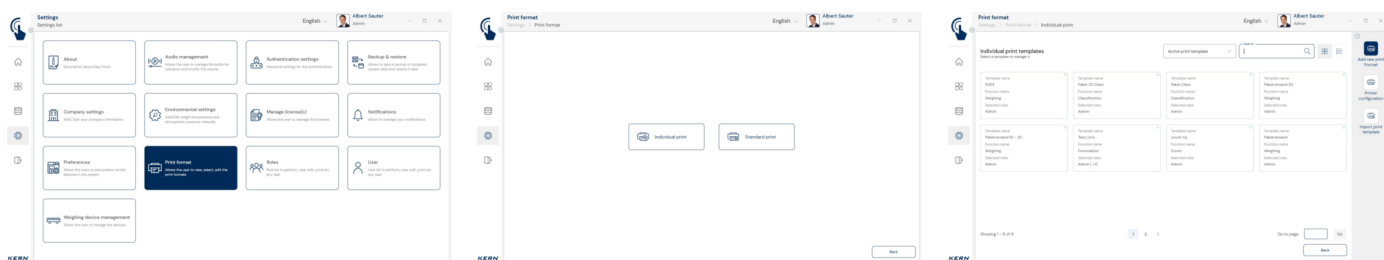

CARACTÉRISTIQUES

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Placement personnalisé d'éléments d'impression : Avec EasyTouch Individual Print, vous concevez votre impression en fonction de vos idées et de vos obligations. Disposez les données comme le poids, le nombre de pièces, le prix, l'utilisateur et/ou la date et l'heure comme vous le souhaitez
- Formats de papier au choix libre entre 20×20 mm et 210×297 mm (DIN A4) : Pour les produits imprimés tels que les étiquettes adhésives, la taille de la page peut être définie selon les besoins, y compris l'avance automatique définissable d'une étiquette à l'autre
- La fonction Barcode permet d'imprimer chaque élément d'impression (par ex. référence d'article, poids net, résultat du comptage des pièces) sous forme de code-barres ou de code QR. Les éléments du code-barres peuvent également être placés librement et dans n'importe quelle taille dans la zone d'impression. Différents types de codes-barres sont disponibles
- Transfert externe de modèles d'impression : possibilité de transférer des modèles d'impression d'une installation EasyTouch locale à une autre, s'il n'y a pas de base de données centrale
- Paramètres personnalisables des utilisateurs et des fonctions : des formats d'impression individuels peuvent être attribués à des groupes d'utilisateurs pour certaines fonctions
- Informations sur l'entreprise : tous les détails de l'entreprise peuvent être sélectionnés, par ex. adresse Web, logos, etc.
- Fonction graphique et image personnalisée : pour chaque image imprimée, il est possible d'intégrer ses propres images, logos ou icônes. Ces éléments graphiques peuvent être placés librement à la taille souhaitée
- Imprimante : Zebra ZD421 de KERN validée. Pour les autres modèles d'imprimantes, veuillez contacter l'assistance KERN

Options

- Assistance KERN pour l'élaboration personnalisée des impressions : nous nous ferons un plaisir de vous aider à créer votre impression personnalisée. Veuillez contacter ETsupport@kern-sohn.com

Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un terminal (PC, ordinateur portable, tablette Android)
- Utilisateur : Il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs dans une licence

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set

PICTOGRAMMES

De série



Option



Aperçu des pictogrammes KERN



EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette



Gestion centralisée des utilisateurs pour les fonctions de KERN EasyTouch. Des données de base, telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits configurables individuellement dans l'appli KERN EasyTouch. Cette structure permet de créer des utilisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettent de se connecter à l'appli KERN EasyTouch.



Cette mémoire stocke toutes les données de pesée et de mesure imprimées et enregistrées. L'enregistrement se fait sur l'appareil d'analyse local ou dans un répertoire serveur central pour tous les systèmes de pesée raccordés (Save Data Server ou Save Data Cloud). Les données dynamiques peuvent à tout moment être consultées, imprimées et exportées sous forme de tableau.



Toutes les données en mémoire sont protégées contre les falsifications. Les modifications des données de base sont également enregistrées dans la mémoire de données dynamique et protégées contre les falsifications (Data Traceability)



Qualification des appareils : système de qualification conforme aux normes comprenant les services de validation suivants : qualification d'installation (IQ), qualification de fonctionnement (OQ)



Fonction de mémoire de données centrale pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée raccordés par KERN EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications.