

Productbrochure

08.08.2026

KERN SET-14

EasyTouch Individual Print - personaliseerbare prints

NEDERLANDS

Software EasyTouch


SET-14

**Individual
Print**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

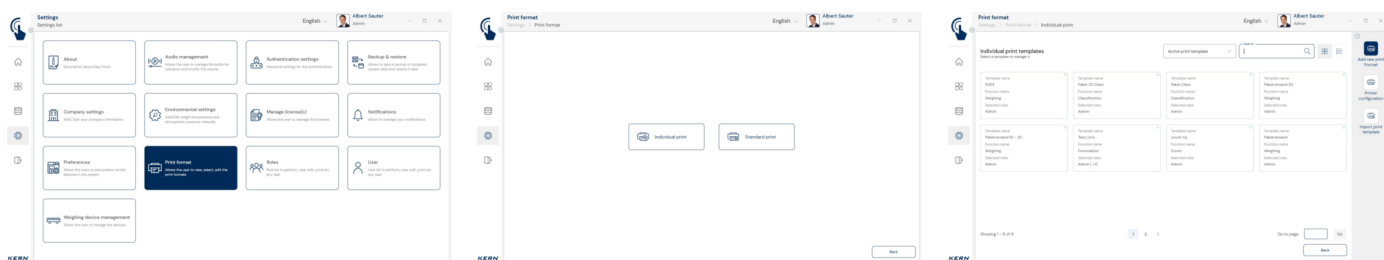

KENMERKEN

- Opmerking: als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- Individueel plaatsen van printelementen: Met EasyTouch Individual Print geeft u uw prints compleet naar uw eigen voorstellingen vorm. Bepaal zelf de volgorde van gegevens zoals gewicht, aantal, prijs, gebruiker en/of datum en tijdstip
- Vrije keuze uit papierformaten tussen 20×20 mm en 210×297 mm (DIN A4): Voor het printen van bijvoorbeeld etiketten kan de paginagrootte naar behoefte worden aangepast, inclusief een definieerbare auto-feed van etiket naar etiket
- Met de barcodefunctie kan elk printelement (bijv. artikelnummer, nettogewicht, totaal aantal stuks) als barcode of QR-code geprint worden. De barcode-elementen kunnen eveneens vrij en in willekeurige grootte in het printgedeelte worden geplaatst. Er zijn verschillende barcodetypes beschikbaar
- Externe overdracht van afdruksjablonen: Mogelijkheid om printsjablonen over te brengen van de ene lokale EasyTouch-installatie naar de andere als er geen centrale database beschikbaar is
- Gepersonaliseerde gebruikers- en functie-instellingen: Afzonderlijke afdrukformaten kunnen worden toegewezen aan afzonderlijke gebruikersgroepen voor bepaalde functies
- Bedrijfsinformatie: alle bedrijfsgegevens selecteerbaar, bijvoorbeeld internetadres, logo's enz.
- Individuele functie voor grafieken en afbeeldingen: bij elke afdruk kunnen eigen afbeeldingen, logo's of icons worden geïntegreerd. Deze grafische elementen kunnen in de gewenste grootte op een willekeurige plek worden geplaatst
- Printer: Zebra ZD421 van KERN vrijgegeven. Neem voor andere printermodellen contact op met de KERN Support

Opties

- KERN Support voor een individuele layout: we helpen u graag bij het maken van een eigen print. Neem contact op met ETsupport@kern-sohn.com

Licentie-informatie

- Omvang van de licentie: één licentie kan op een device (pc, laptop, Android-tablet) worden gebruikt
- Gebruiker: onder één licentie kan een onbeperkt aantal gebruikers worden aangelegd

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



KERN Overzicht pictogrammen



EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet



Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.



In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.



Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).



Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwalificatie (OQ)



Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.