

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN SET-18

DEUTSCH

Software EasyTouch


SET-18

**Container
Master**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

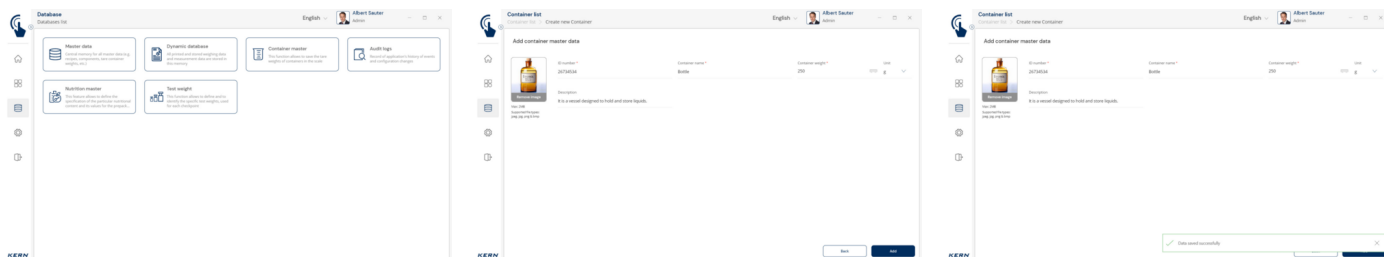

MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Behälter-Management: Verschiedene Artikel werden in gleichartigen Behältern (Containern) gelagert und gewogen. Die Tara-Gewichte dieser Behälter lassen sich mit SET-18 Container Master zentral verwalten. Ändert sich das Gewicht eines Behälters, wird das neue Tara-Gewicht einfach in Container Master aktualisiert und automatisch bei allen zugehörigen Artikeln und Funktionen der Anwendung übernommen
- Feste Zuordnung: Jedem Stammdatenobjekt kann ein Behälter fest zugeordnet werden, um Konsistenz zu gewährleisten
- Behälter-Anzeige: Bei der Verwendung eines Stammdatenobjektes sehen Nutzer in EasyTouch den fest zugeordneten Behälter oder einen manuell ausgewählten Behälter. Dies reduziert das Risiko von Verwechslungen und verbessert die Genauigkeit im Arbeitsprozess
- Behälter-Auswahl: Nutzer können auch ohne vorherige Festlegung einen Behälter direkt im Wiegevorgang auswählen, beispielsweise durch Scannen der Behälter-ID mittels Barcode. Dies trägt dazu bei, fehlerhafte Tara-Eingaben zu vermeiden

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf einem Endgerät (PC, Laptop, Android-Tablet) betrieben werden

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base

PIKTOGRAMME

Standard



Option



KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.