

Brochure produit

08.08.2026

KERN SET-311

EasyTouch Quick Key – Sélectionner rapidement des objets de données de base en fonction de l'utilisateur


FRANÇAIS

Software EasyTouch SET-311 **Quick Key**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

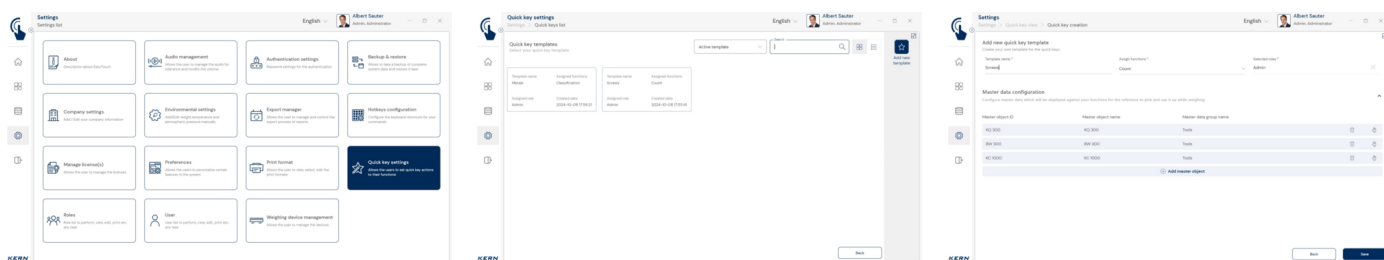

CARACTÉRISTIQUES

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Quick Keys peuvent être créées dans de nombreux sets, par exemple
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Touches de sélection rapide des données de base : grâce à ET Quick Key, certains objets de données de base peuvent être affichés en permanence pour une sélection rapide. Les touches rapides sont affichées directement à l'écran
- Enregistrer : conventionnel ou sélectionné par touche rapide, chaque résultat d'une pesée ou d'un comptage de pièces est enregistré avec une référence à l'objet de données de base sélectionné
- Sélection des objets de données de base : les objets de données de base spécifiques qui sont affichés en tant que touches rapides peuvent être sélectionnés soit individuellement, soit en tant que groupe de données de base défini qui contient les données de base en tant que touches rapides
- Par utilisateur : les Quick Keys peuvent être créées en tant que schéma se rapportant à des rôles utilisateurs spécifiques. Cela signifie que les utilisateurs d'un certain rôle peuvent voir certains objets de données de base pour une sélection rapide. Cela permet par exemple à différents services d'une même entreprise de travailler avec des données de base différentes sans se chevaucher
- Enregistrer et imprimer : pour chaque schéma, il est possible de définir si, en plus du processus d'enregistrement, l'impression doit être automatique ou non
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l'ordinateur portable ou la tablette

Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un terminal (PC, ordinateur portable, tablette Android)
- Balances : Il est possible de créer et d'utiliser un nombre illimité de balances dans une licence

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set

PICTOGRAMMES

De série



Option



Aperçu des pictogrammes KERN



EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette



Gestion centralisée des utilisateurs pour les fonctions de KERN EasyTouch. Des données de base, telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits configurables individuellement dans l'appli KERN EasyTouch. Cette structure permet de créer des utilisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettent de se connecter à l'appli KERN EasyTouch.



Cette mémoire stocke toutes les données de pesée et de mesure imprimées et enregistrées. L'enregistrement se fait sur l'appareil d'analyse local ou dans un répertoire serveur central pour tous les systèmes de pesée raccordés (Save Data Server ou Save Data Cloud). Les données dynamiques peuvent à tout moment être consultées, imprimées et exportées sous forme de tableau.



Toutes les données en mémoire sont protégées contre les falsifications. Les modifications des données de base sont également enregistrées dans la mémoire de données dynamique et protégées contre les falsifications (Data Traceability)



Qualification des appareils : système de qualification conforme aux normes comprenant les services de validation suivants : qualification d'installation (IQ), qualification de fonctionnement (OQ)



Fonction de mémoire de données centrale pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée raccordés par KERN EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications.