

Productbrochure

08.08.2026

KERN SET-311

EasyTouch Quick Key – stamgegevens van objecten snel en gebruikersspecifiek selecteren


NEDERLANDS

Software EasyTouch SET-311 **Quick Key**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

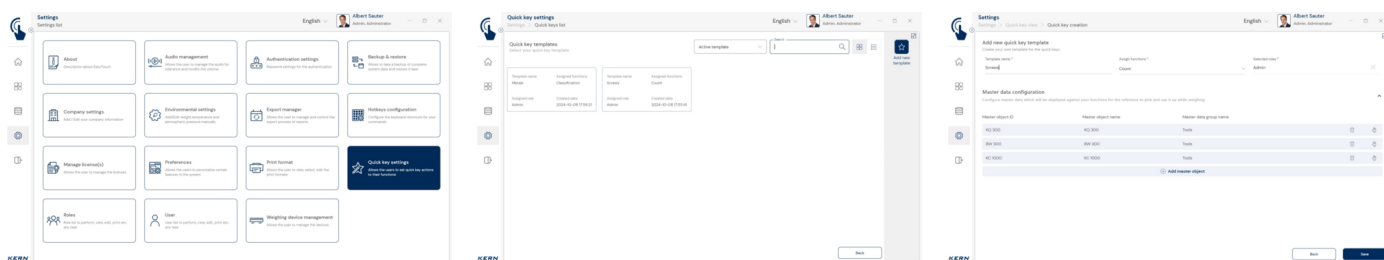

KENMERKEN

- Opmerking: als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- Quick Keys kunnen in verschillende sets worden aangemaakt, bijv.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Sneltoetsen voor stamgegevens: met ET Quick Key kunnen bepaalde stamgegevensobjecten permanent worden weergegeven voor een snelle selectie. De Quick Key is direct op het beeldscherm te zien
- Opslaan: ongeacht of het resultaat op de conventionele manier of per Quick Key verkregen is, elk resultaat van een weging of stuktelling wordt opgeslagen met verwijzing naar het geselecteerde stamgegevensobject
- Selectie van de stamgegevensobjecten: de vastgelegde stamgegevensobjecten die als Quick Key worden weergegeven, kunnen stuk voor stuk of als gedefinieerde stamgegevensgroep geselecteerd worden die de stamgegevens als Quick Key bevat
- Gebruikersspecifiek: de Quick Keys kunnen aangelegd worden als schema met het oog op bepaalde gebruikersrollen. Dit betekent dat de gebruikers van een bepaalde rol bepaalde stamgegevensobjecten te zien krijgen voor een snelle selectie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld verschillende afdelingen in hetzelfde bedrijf met verschillende stamgegevens werken zonder dat deze elkaar overlappen
- Opslaan en printen: per schema kan ingesteld worden of er naast het opslaan ook automatisch geprint moet worden of niet
- Communicatie weegschaal-device: de weegschaal(en) kan of kunnen per seriële aansluiting, USB, bluetooth, ethernet of WiFi met de pc, laptop of tablet communiceren

Licentie-informatie

- Omvang van de licentie: één licentie kan op een device (pc, laptop, Android-tablet) worden gebruikt
- Weegschalen: er kan een onbeperkt aantal weegschalen onder één licentie worden aangelegd en gebruikt

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



KERN Overzicht pictogrammen



EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet



Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.



In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.



Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).



Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwilificatie (OQ)



Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.