

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN SET-37

EasyTouch Export Manager – Ergebnisdaten automatisch und zuverlässig aus EasyTouch exportieren – z. B. zum Import in Ihr ERP-System

DEUTSCH

Software EasyTouch


SET-37

**Export
Manager**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

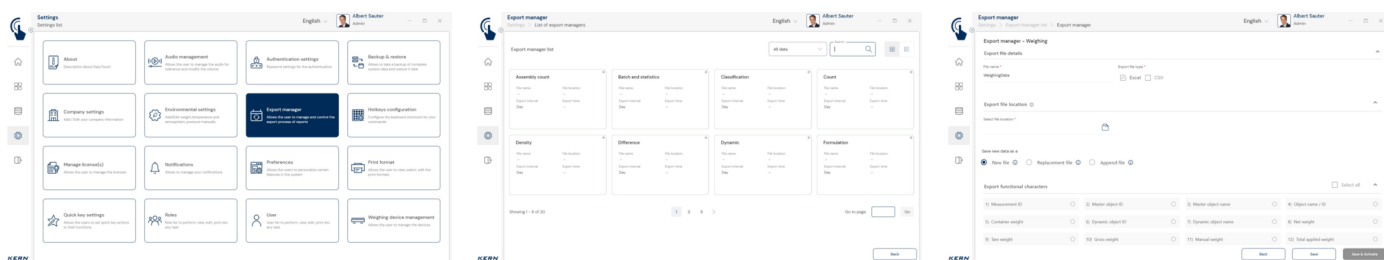

MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Datenexport: Der Export Manager bietet einen automatischen Datenexport in einem individuell wählbaren Zeitintervall. Dabei werden unterschiedliche Dateiformate wie CSV oder XLSX unterstützt, um eine nahtlose Weiterverarbeitung der Daten, beispielsweise in ERP-, und PPS-Systemen zu ermöglichen
- Daten-Ablageort: Der Speicherort für exportierte Dateien kann frei definiert werden
- Datenfelder: Abhängig von der ausgewählten EasyTouch Funktion lassen sich die zu exportierenden Datenfelder frei bestimmen
- Exportintervalle: Zeitpunkte und Intervalle für die Exporte sind frei einstellbar, z. B. ein, oder mehrmals täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich zu festgelegten Zeiten
- Export-Historie: Mit Export-log Historie kann auf alle früheren Export-Dateien zugegriffen werden
- SaveServer: Nutzen Sie diese Funktion für einen Datenexport vom zentralen SaveServer
- Export-Datei-Varianten: Sie können zwischen verschiedenen Exportoptionen wählen:
 - a. Export in eine neue Datei
 - b. Export in die bestehende Datei

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf einem Endgerät (PC, Laptop, Android-Tablet) betrieben werden

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base

PIKTOGRAMME

Standard



Option



KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.