

Folleto del producto

08.08.2026

KERN SET-40

EasyTouch Protect – Proteger de forma segura y eficaz los datos confidenciales de la empresa




ESPAÑOL

Software EasyTouch SET-40 **Protect**

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 +49 7433 9933-0
 info@kern-sohn.com
 www.kern-sohn.com

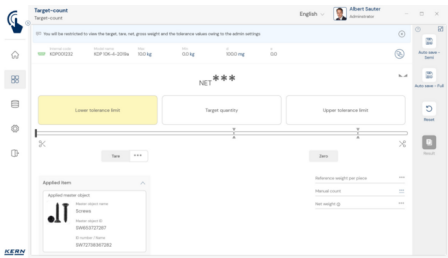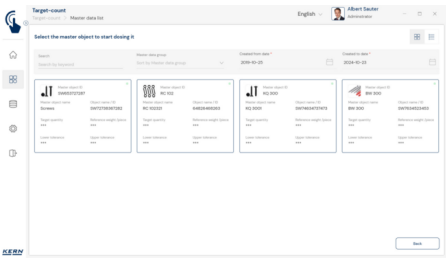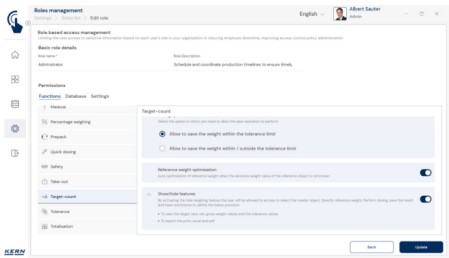

CARACTERÍSTICAS

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- SET-40 Protect es compatible con los siguientes conjuntos: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count y SET-31 Tolerance
- Protección de recetas confidenciales: Esta función permite ocultar todos los datos críticos de la receta para evitar el acceso no autorizado a los mismos
- Protección de datos de pesaje confidenciales: Al dosificar o pesar, los valores de peso objetivo se representan neutralizados con "****" para que sólo sea visible el resultado mostrado gráficamente basado en el valor objetivo y los valores de tolerancia inferior y superior
- Protección de nombres de objeto confidenciales: El nombre de una sustancia u objeto se enmascara para determinados grupos de usuarios, de modo que en el caso mínimo solo es visible el número de identificación de la sustancia sin valores del peso objetivo
- Opciones flexibles de protección de datos: Dependiendo de la función del usuario, puede seleccionar si solo deben mostrarse los valores del peso objetivo o también las denominaciones p. ej. de los distintos componentes de la receta
- Introducción de la cantidad objetivo total: En la pantalla de inicio, los usuarios introducen la cantidad objetivo total sin ver las cantidades objetivo individuales ni los pesos de los componentes
- Resultados enmascarados: En la pantalla de resultados, los pesos objetivo y los pesos realmente pesados también se muestran enmascarados solo como "****"
- Visualización de cantidad limitada en la memoria: En Memoria Dinámica, no se muestran cantidades para determinados grupos de usuarios
- Visualización transparente para los administradores: Los grupos de usuarios autorizados, como los administradores, pueden visualizar en cualquier momento las cantidades o los pesos deseados, así como los pesos realmente pesados

Opciones

- Función de almacenamiento de datos central Save Server (SET-10) para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje EasyTouch conectados, así como de todas las funciones EasyTouch que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, pudiendo buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar
- Save-Cloud: Tiene, al igual que el Servidor seguro, la misma función de memoria central de datos de todos los sistemas ET conectados. La diferencia es que en Save-Data Cloud, la memoria está ubicada en un servidor de KERN accesible vía Internet, en vez de en un servidor de la red local. La ventaja de Save-Data Cloud consiste en que la instalación se realiza automáticamente y no se requiere ningún administrador de red, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): Esta función permite reservar determinados objetos de datos maestros para ciertos roles de usuario. Los objetos seleccionados se muestran a estos usuarios en la pantalla como botones de acceso rápido

Información sobre licencias

- Alcance de la licencia: Una licencia puede emplearse en un terminal (ordenadores, portátiles o tabletas Android)
- Usuarios: Con una licencia se pueden crear tantos usuarios como se desee, sin límite alguno
- Balanzas: Con su licencia puede crear y emplear un número ilimitado de balanzas
- Comunicación con el terminal de balanzas: La o las balanzas se pueden comunicar por una conexión en serie, USB, Bluetooth, Ethernet o por WiFi con un ordenador, portátil o tableta

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base

PICTOGRAMAS

Estándar	Opción
   	 

Resumen de pictogramas de KERN



EasyTouch: Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta



Administración central de usuarios para las funciones de EasyTouch de KERN. Para cada usuario se pueden programar datos maestros primarios como p. ej. el nombre, los apellidos y la foto. A cada usuario se le asigna un rol de usuario en el que se pueden configurar los derechos individualmente en la aplicación EasyTouch de KERN. Esta estructura permite crear un usuario estándar, otro supervisor, etc. El registro en la aplicación EasyTouch de KERN se realiza con el nombre del usuario y la contraseña.



En esta memoria se guardan todos los datos de pesaje y medición impresos y almacenados. Los datos se guardan en el indicador localmente, o bien de forma centralizada – para todos los sistemas de pesaje conectados – en un directorio del servidor (en Save-Data Server o en Save-Data Cloud). Los datos dinámicos se pueden consultar de nuevo en cualquier momento así como imprimir o exportar en forma de tabla.



Todos los datos de la memoria se guardan a salvo de manipulaciones. Las modificaciones de los datos maestros también se guardan de forma segura frente a las manipulaciones en una memoria de datos dinámica (trazabilidad de los datos)



Cualificación de dispositivos: concepto de cualificación normativo que abarca las siguientes prestaciones de validación: Cualificación de instalación (IQ), cualificación de función (OQ)



Función de memoria central de datos para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje conectados mediante EasyTouch de KERN, así como de todas las funciones de EasyTouch de KERN que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, con lo que pueden buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save-Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar.