

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN SET-40

EasyTouch Protect – Proteggere i dati aziendali sensibili in modo sicuro ed efficiente




ITALIANO

Software EasyTouch SET-40 **Protect**

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

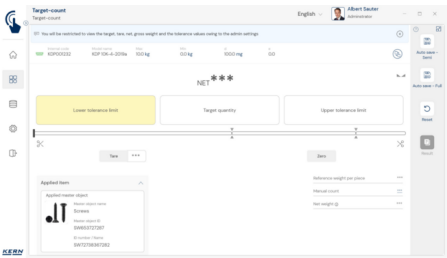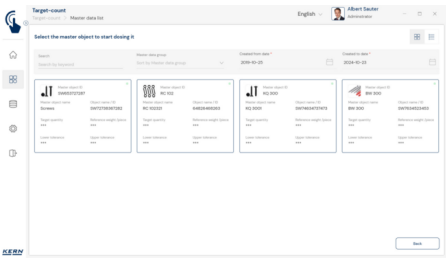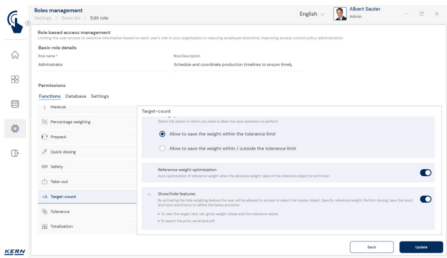

CARATTERISTICHE

- Nota: Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-40 Protect è compatibile con i seguenti set: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count e SET-31 Tolerance
- Protezione delle ricette sensibili: Questa funzione può essere utilizzata per nascondere tutti i dati critici della ricetta e impedirne l'accesso non autorizzato
- Protezione dei dati di pesatura sensibili: Durante il dosaggio o la pesatura, i valori di pesatura target sono rappresentati in modo neutro da "****", in modo che sia visibile solo il risultato grafico basato sul valore target e sui valori di tolleranza inferiore e superiore
- Protezione dei nomi degli oggetti sensibili: Il nome di una sostanza o di un oggetto viene mascherato per alcuni gruppi di utenti, in modo che sia visibile al massimo il numero identificativo della sostanza senza i valori del peso target
- Opzioni flessibili di protezione dei dati: A seconda del ruolo dell'utente, è possibile scegliere se visualizzare solo i valori di peso target o anche i nomi dei singoli componenti della ricetta, per esempio
- Immettere la quantità totale di destinazione: Nella schermata iniziale, gli utenti inseriscono la quantità totale del target senza vedere le singole quantità del target o i pesi dei componenti
- Risultati mascherati: Nella schermata dei risultati, anche i pesi target e i pesi effettivamente pesati vengono visualizzati solo in modo mascherato come "****"
- Visualizzazione di quantità limitate nella memoria: In Dynamic Memory non vengono visualizzate le quantità per alcuni gruppi di utenti
- Visualizzazione trasparente per gli amministratori: La visualizzazione in chiaro delle quantità o dei pesi previsti e dei pesi effettivamente rilevati è sempre disponibile per i gruppi di utenti autorizzati, come gli amministratori

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile
- Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di memoria dati centrale per tutti i sistemi ET collegati, come Save-Data Server. La differenza consiste nel fatto che nel Save-Data Cloud i dati sono salvati in un server KERN, raggiungibile da Internet e non su un server che si trova nella rete locale. Il vantaggio del Save-Data Cloud sta nel fatto che la configurazione si svolge in modo automatico e non è necessario l'intervento di un amministratore di rete, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): questa funzione consente di riservare determinati oggetti con dati base per determinati ruoli utente. Gli utenti in questione possono visualizzare gli oggetti selezionati come tasti di accesso rapido sullo schermo

Informazioni sulla licenza

- La licenza include: Una licenza può funzionare su un terminale (PC, laptop, tablet Android)
- Utenti: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- Bilance: Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- Comunicazione balance-terminale: La(le) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



Panoramica dei pittogrammi KERN



EasyTouch: Adatto per la connessione, trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet



Gestione centrale utenti per funzioni KERN EasyTouch. Per ogni utente si possono salvare i dati base primari, come per es. nome, cognome, immagine. A ogni utente viene assegnato un ruolo utente, che nell'app KERN EasyTouch dispone di diritti configurabili in modo personalizzato. Questa struttura permette di creare utente standard, utente supervisore ecc. Il login nell'app KERN EasyTouch avviene mediante nome utente e password.



In questa memoria sono salvati tutti i dati di pesata e di misurazione stampati e memorizzati. Il salvataggio avviene sull'apparecchio indicatore locale o a livello centralizzato – per tutti i sistemi di pesata collegati – in una server directory (Save Data Server o Save Data Cloud). I dati dinamici possono essere consultati in qualsiasi momento e stampati o esportati sotto forma di tabella.



Tutti i dati di memoria sono salvati in modo da non essere manipolabili. Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (Data Traceability)



Qualificazione apparecchio: concetto di qualificazione conforme alle normative, che comprende i seguenti servizi di validazione: Qualificazione dell'installazione (IQ), qualificazione del funzionamento (OQ)



Funzione centralizzata di salvataggio dati per la memorizzazione aggiuntiva di tutti i dati di misurazione in una server directory locale e centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata KERN EasyTouch collegati e di tutte le funzioni KERN EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save-Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile.