

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN SET-411

EasyTouch Hotkeys – Schnellasten und externe Schalter

DEUTSCH

Software EasyTouch


SET-411

**Hotkeys**

## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 +49 7433 9933-0  
 [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

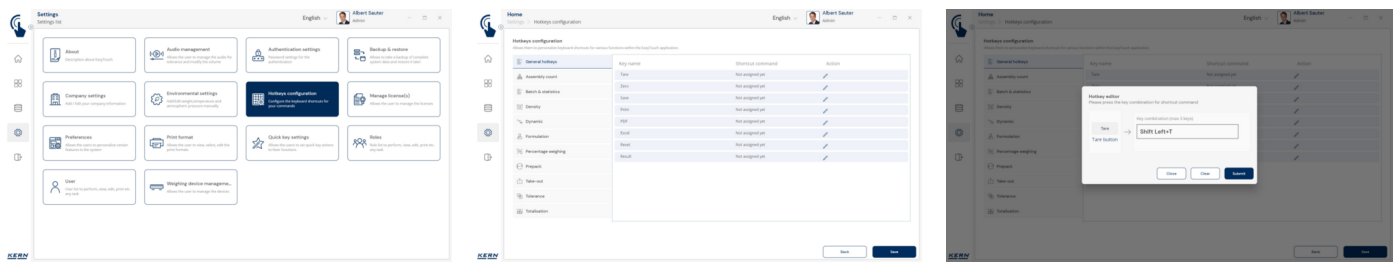

## MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Schnellasten: Hotkeys ermöglicht die Belegung aller Schaltflächen in EasyTouch mit Tastenkombinationen. Dies vereinfacht den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen erheblich, da die umständliche Navigation mit der PC-Maus entfällt. Stattdessen können gewünschte Aktionen schnell und direkt über die Tastatur ausgelöst werden
- Optionsartikel: Hotkeys ist eine optionale Erweiterung von EasyTouch, die alle aktiven und installierten Funktionen unterstützt. Bitte beachten Sie, dass im Preis der Zusatzfunktion keine Hardware wie Schalter, Taster oder Fußpedale enthalten ist
- Konfiguration der Schnellasten: Die Festlegung der Tastenkombinationen kann vom Systemadministrator oder einer autorisierten Person vorgenommen werden. Dabei lässt sich für jede gewünschte Funktion eine eindeutige und benutzerspezifische Tastenkombination festlegen
- Vielseitige Hotkeys-Auswahl: In EasyTouch können nicht nur spezifische Aktionstasten für bestimmte Funktionen, sondern auch allgemeine Tastenbefehle wie „Speichern“ oder „Tara“ als Hotkeys definiert werden. Diese sind dann in allen EasyTouch Funktionen anwendbar
- Aktivierung über Tastenkombination: Beispielsweise kann die TARE-Funktion einfach und schnell durch eine Tastenkombination aktiviert werden
- Integration externer Schalter oder Tasten: EasyTouch unterstützt die Zuordnung von Tastenkombinationen zu Signalen externer HID-Geräte (Human Interface Devices) über USB. So lässt sich die Software über externe Schalter wie Not-Aus-Knöpfe oder Fußschalter bedienen, was einen hands-free Betrieb und gesteigerte Effizienz ermöglicht. Zum Ablauf: In der Steuerungssoftware des handelsüblichen USB-Gerätes wird das externe Signal einer Tastenkombination zugeordnet. Diese wird vom PC empfangen. Dort betätigt das Signal die zugeordnete EasyTouch Funktion

## BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base

## PIKTOGRAMME

Standard



Option



## KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiegedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.