


Balanza con pasamanos KERN MTS

Balanza económica con pasamanos para sentirse seguro al pesaje con aprobación de homologación y médica para uso profesional en el diagnóstico médico



Nuestro distribuidor especializado

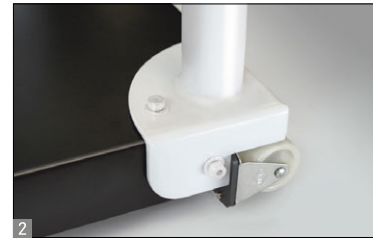

Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Ideal para residencias geriátricas, plantas geriátricas de hospitales, medicina interna etc.
- La estructura de retención estable permite a los pacientes más débiles permanecer de pie seguramente garantizando al mismo tiempo un peso preciso
- Superficie grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
- Su altura reducida facilita su acceso
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y leer cómodamente los valores de pacientes (como p. ej. la altura) para calcular el IMC


- 2 ruedas para facilitar el transporte de la balanza
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptador de red; acumulador opcional

Datos técnicos

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 550×550×62 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 210×110×50 mm
- Dimensiones totales A×P×A 550×550×1100 mm
- Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 70 h
- Adaptador de red (externo) está incluido
- Peso neto aprox. 20 kg

Accesorios

- Tallímetro mecánico, campo de medición entre 60-205 cm, para atornillar al soporte o para poner encima, acreditación médica conforme a 93/42/CEE, KERN MSF 200
 - Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN EOB-A02S05
 - Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida - sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01
 - Uso con acumulador interno, duración de servicio aprox. 50 h, tiempo de carga aprox. 24 h, KERN FOB-A08
 - Cable de interfaz RS-232 para la conexión de un aparato externo, KERN MPS-A08
 - Impresora de agujas matricial, KERN YKN-01
 - Impresora de etiquetas, KERN YKE-01
 - Impresora térmica, KERN YKB-01N
- Detalles están en el internet

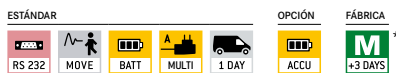

* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M III	KERN
KERN MTS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129	

Pictograma

RS 232 **Interfaz de datos RS-232:**
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red.

MOVE **Función Hold (retención):** en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio.

BATT **Alimentación por acumulador:**
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.

ACCU **Alimentación por acumulador:**
Juego de acumulador recargable.

MULTI **Adaptador de red universal:** con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, GB, CH; C) UE, GB, CH, USA, AUS

M +3 DAYS **Homologación:**
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles.

1 DAY **Envío de paquetes:**
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.