


KERN SET-101 EasyTouch Save-Cloud

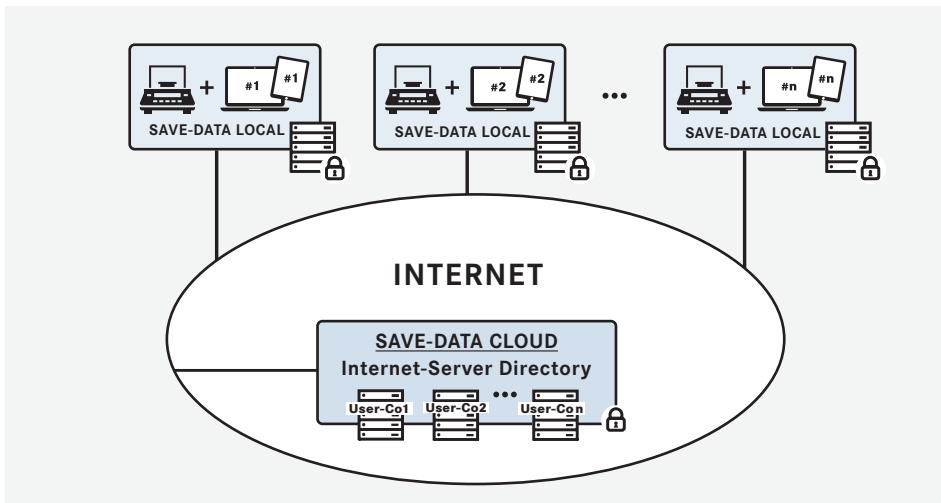


ET Save-Cloud – Sichere Internet-Datenspeicherung


Merkmale

- Hinweis: die notwendige Basis ist **SET-01 ET OS** (Basispaket). SET-101 ist Teil der „**Save-Data-Group**“ von KERN EasyTouch, mit Save-Data Local und Save-Data Cloud
- **Save-Data Cloud** setzt auf **Save-Data Local**  auf. Save-Data Local ist Teil von SET-01 (ET OS Basispaket). Save-Data Local ist der zentrale Messdatenspeicher aller ET-Funktionen in einer lokalen KERN EasyTouch Lizenz (dynamischer Datenspeicher). In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiegedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt im Speicher des lokalen Auswertegeräts. Alle Speicherdaten sind manipulationssicher, also unveränderlich gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability) . Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen werden und ausgedruckt bzw. per Tabelle exportiert werden.
- **Save-Data Cloud**: Speichert alle Messdaten in Kopie zur **lokalen Speicherung in einem zentralen Internet-Cloud-Verzeichnis** von KERN. Auf diesem zentralen Cloud-Verzeichnis speichern alle KERN EasyTouch Systeme ihre Messdaten in Kopie ab. Mit dem zentralen Cloud-Verzeichnis wird sichergestellt, dass alle Messdaten zentral abgelegt werden und jederzeit an einer zentralen Stelle wieder aufrufbar sind. Im KERN Cloud Server wird jeder Lizenz-Familie eine eigene Datenbank zugeordnet. Jede Datenbank ist autark und den anderen Datenbanken abgegrenzt. Damit kann niemand von außen auf die jeweiligen Datenbanken zugreifen

- **Save-Data Cloud**: Alle Messdaten werden **manipulationssicher** auf einem Cloud-verzeichnis gespeichert (Messwertespeicher). Somit ist Datenverlust oder Datenveränderung nicht möglich
- **Datenexport**: Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen werden und ausgedruckt bzw. per Tabelle exportiert werden, insofern nicht durch Anti-Cybercrime Funktion begrenzt
- Die Veränderungen von **Stammdaten** werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)
- **Automatische Einrichtung**: Die Einrichtung des zentralen Internet-Datenspeichers (Save-Cloud) wird vollautomatisch bei der Anmeldung der Lizenz vollzogen. Jede weitere Lizenz innerhalb derselben Lizenz-Familie wird in die Speicherung auf dem zentralen Cloud-Verzeichnis einbezogen – ebenfalls automatisch. Die Vorteil gegenüber der Save-Server Lösung besteht darin, dass **kein Netzwerkadministrator erforderlich** ist
- **Validierung und geeichter Betrieb**: Durch Software-Validierung ist sichergestellt, dass dieser sichere Server-Datenspeicher z. B. für Organisationen im Pharma-Bereich verwendet werden kann (Normkonformität 21 CFR Part 11, u.a.). Wiegedaten aus gesetzlich geregelten Verwendungen können in EasyTouch normkonform gespeichert und archiviert werden, indem freigegebene Waagen mit gültiger Eichung und ALIBI-Speicher verwendet werden. Diese normkonforme Datenhaltung gilt auch für SaveServer und SaveCloud.
- **Multi-Standorte**: KERN EasyTouch Save-Data Cloud konsolidiert die Wiege- und Messdaten von Wiegeanlagen in verschiedenen geografischen Standorten oder Niederlassungen

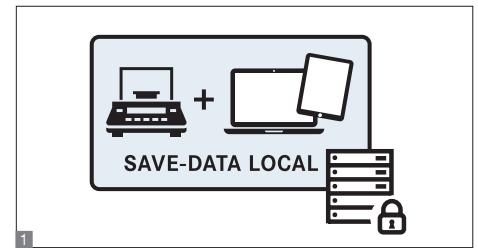

Save-Data Local

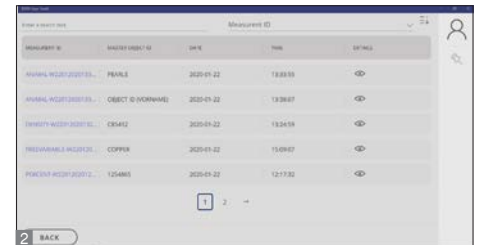

Dynamischer Speicher

Optionen

- **Anti-Cybercrime-Modus**: Diese Funktion erlaubt eine Einstellung von Rechten, die sich auf die Benutzer-Rollen bezieht. Die Rechte-Einstellungsfunktion ermöglicht die Einstellung von Lesen und Drucken und das Kopieren von Stammdaten und dynamischen Daten sowie das Verändern von Stammdaten, KERN SET-125, **€ 50,-**
- **XL-Datenpaket**: Erweitert den verfügbaren Speicherplatz für Daten, KERN SET-102, **Preis auf Anfrage**
- **XXL-Datenpaket**: Erweitert den verfügbaren Speicherplatz für Daten, KERN SET-103, **Preis auf Anfrage**

Technische Daten

- **Lizenzumfang**: Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden. D. h. bis zu vier Endgeräten können innerhalb einer Lizenz Daten auf einem Save-Server speichern

STANDARD



OPTION



KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
ET Save-cloud Funktion	
SET-101	30,-/ Monat